

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/31	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १८/०९/२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम/नोकरीचे क्रियाकलाप: माउंटिंग मशीन

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पर्ट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

१.पॉवर (A) चालू करा

२.(ब) पाण्याचा प्रवाह अखंडित असल्याची खात्री करण्यासाठी जलवाहिनी तपासा आणि ती बंद करा.



३.उजव्या बाजूचा लिव्हर (C) चालवून स्पिंडल वरच्या दिशेने न्या आणि माउंटिंग मशीनमधील (D) झाकण उघडा.

४.चेबरच्या आतील पृष्ठभागावर, स्पिंडलच्या (E) वरच्या भागावर आणि टॉप कव्हरच्या (F) आतील पृष्ठभागावर WD 40 स्प्रे (एरोसोल) लावा.

५.माउंटिंगसाठी १८.५ ग्रॅम फिनोलिक पावडर वजन करून बटर पेपरवर (G) ठेवा.

६.दर्शवल्याप्रमाणे नमुना स्पिंडलच्या वर ठेवा. (H) आणि उजव्या बाजूला असलेला नॉब अनलॉक करून स्पिंडल खाली करा (I)

७.छिद्राच्या मध्यभागी असलेल्या चेबरमध्ये पावडर अगदी हळू हळू ओता.

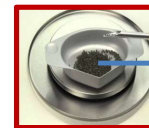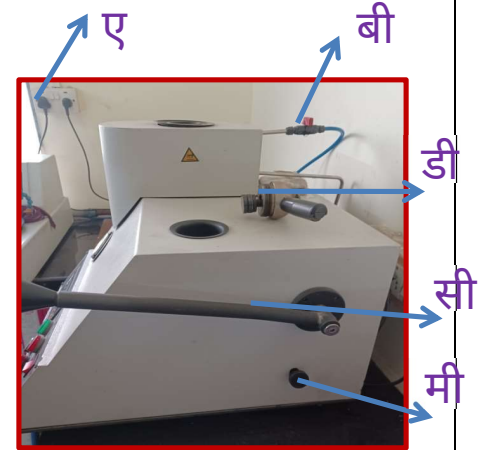

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हरष दोशी	सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/31	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १८/०९/२०२३	

८. चेबरवर झाकण ठेवा आणि ते घड्याळाच्या दिशेने फिरवा.

९ वरून झाकण घट्ट करून सोडून द्या.
घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने थोडेसे फिरवून.

१० उजव्या बाजूला असलेला नॉब (I) लॉक करा.

११. मागील बाजूस असलेला मुख्य स्विच चालू करा.
मशीन (जे)

१२ समोरच्या उजव्या बाजूला असलेले लाल पॉवर बटण (K) 'चालू' करा.
हाताचा कोपरा

१३. जेव्हा डिस्प्लेवर 'सायकल पूर्ण झाले' असे दिसेल, तेव्हा चालू करा.
सायकल हीटिंग' (L)

१४ उजव्या बाजूच्या लिव्हर (C) द्वारे दाब देत रहा.
दाब 2000 psi (M) आणि तापमान 160 पर्यंत
पोहोचेपर्यंत सतत खाली दाबून°C. दाब कायम ठेवा.

१५ १६० वर°C तापमान आणि 2000 psi दाबावर, तापवणे थांबवले जाते.
आणि थंड करण्याची प्रक्रिया सुरू होते (N)

१६. उघडून साच्याकडे पाण्याचा प्रवाह चालू करा.
पाईपलाईनमध्ये वाल्व (B).

१७ जेव्हा साच्याचे तापमान खोलीच्या तापमानाइतके होते,
नॉब (I) सैल करा आणि झाकण (E) घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने
फिरवून काढा.

१८. नॉब (I) लॉक करा आणि उजव्या बाजूचा लिव्हर (©) वापरून स्पिंडल वर उचला आणि काढून टाका.
नमुना.



जे



के

एल



एम

एन

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हरष दोशी	सही:		दिनांक:	