



ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଷୟସ୍ତ୍ରୋତ/କ୍ଷୟସ୍ତ୍ରୋତ/୦୭/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୭/୦୧/୨୦୨୪	

ଏହି ମିଲ୍ଲିୟାଟ୍‌କନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକଳାପ: ଅପଟିକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋ ସକୋପ୍

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବହାରୀତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା
ଆବଶ୍ୟକ। |  | ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଶ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। |
|  | ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୋଗ
ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। |  | ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଶୁଦ୍ଧାତା ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଫଟି/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା |
|  | ଶ୍ରାବ୍ୟକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ
ଆବଶ୍ୟକ। |  | ତେଲ ମଳୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା |
| | |  | ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ
ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା |

୧. ଡେସ୍କଟପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାରୀତ ସଫଟ୍‌ୱେର୍ ଖୋଲିବେ [ଚିତ୍ର ୧]
୨. ଅପଟିକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସକୋପ୍‌ରେ POWER ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର ୨]
୩. ସ୍ଥାପିତ ନମୁନାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ଡିଲିଭେରି କରି ରଖନ୍ତୁ
[ଚିତ୍ର ୨]
୪. ସ୍କାନିଂରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ଡିଲିଭେରି ସଫଟ୍‌ୱେର୍‌ରେ
ଉପର ସ୍ଥାନରେ କଲିକ୍ କରିବେ [ଚିତ୍ର ୩]
୫. ଉପର ସ୍ଥାନରେ ଡିଲିଭେରି ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ USB2_5M(1) ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2592X1544
ରେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଟ୍ କରିବେ [ଚିତ୍ର ୩]
୬. ସ୍କାନିଂରେ ଏକ ଭଲ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଅପଟିକାଲ୍
ମାଇକ୍ରୋସକୋପ୍‌ରେ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପତ୍ୱ ଫୋକସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ
୭. ଅବଲେକ୍ଷଣରେ ୨୦X ମାୟାଗ୍ରାଫିକେସନ୍ ଲେନସ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୨୦୦ X ମାୟାଗ୍ରାଫି
ପାଇଁ କ୍ଲିୟାର୍‌ସେଟ୍ କରିବେ [ଚିତ୍ର ୪]
୮. କ୍ଲିୟାର୍‌ସେଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରଶନୀୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତାରେ ଏମ୍‌ବେଡ୍ ହୋଇଥିବା
ମାଇକ୍ରୋସକୋପ୍ ମାରିକର ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ଫ୍ରେମ୍ କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର ୫]
୯. ପ୍ରକ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାରୀତ ଡିଲିଭେରି ଡିଲିଭେରି ROI ଚୟନ
କରିବେ [ଚିତ୍ର ୬]

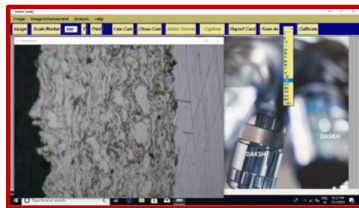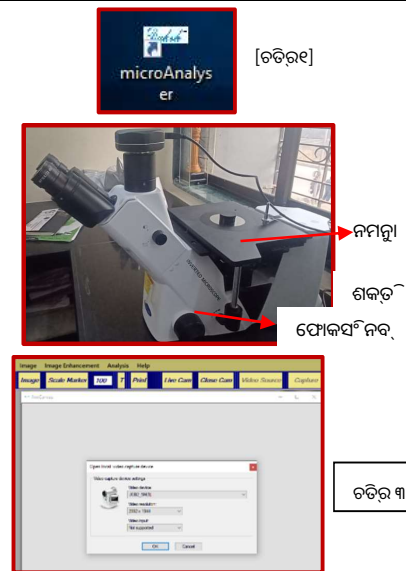

ଚିତ୍ର ୬



ଚିତ୍ର ୫



ଚିତ୍ର ୬


ମିଲ୍ଲିୟାଟ୍‌କନକାରୀ	ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ହର୍ଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୨/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୭/୦୧/୨୦୨୪	

୧୦. ପୋରୋସିଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆଗରୁହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର 7a ଏବଂ 7b]



[ଚିତ୍ର 7a]

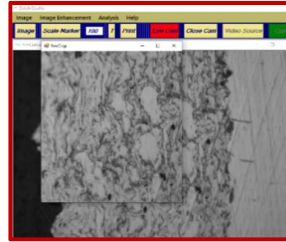


[ଚିତ୍ର 7ଖ]

୧୧. ଚୟନ କରନ୍ତୁ ପୋରୋସିଟି ASTM 2109 ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ [ଚିତ୍ର 8କ]


ଏବଂ [ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା] ପରାସ୍ତ ଖଣିଜତା ଦେଖାଯାଏ [ଚିତ୍ର 8ଖ]

୧୨. ପୋରୋସିଟି ମାପ ପାଇଁ, ଆଗରୁହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟ୍ରେ, ନିମ୍ନ ସୀମାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ପରାସ୍ତ ଖଣିଜତା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପୋରୋସିଟି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାପକରୋଷ୍ଟରକ୍ଷକରେ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ।


୧୩. ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋରୋସିଟି ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପାଇଁ 'ପୋରୋସିଟି' ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ 'ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ' [ଚିତ୍ର ୭ଖ] ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭାବରେ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପକରୋଷ୍ଟରକ୍ଷକ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର 8ଗ]। ନିମ୍ନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ପରାସ୍ତ 10 କମିବା ତା'ପରେ ଆଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଏ।

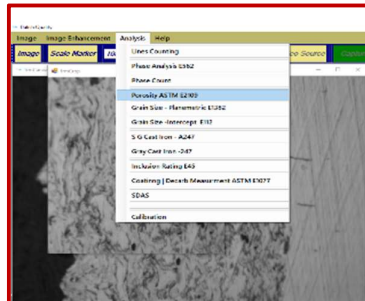

[ଚିତ୍ର 8କ]

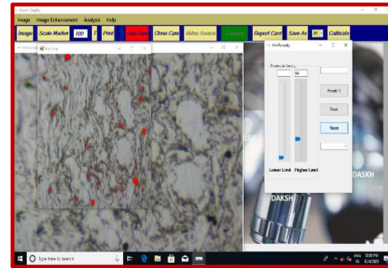


[ଚିତ୍ର 8ଖ]

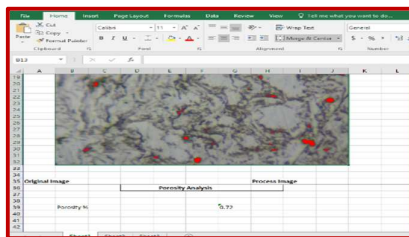


[ଚିତ୍ର 8ଗ]

୧୪. ଆବରଣର ଘନତା ମାପ ପାଇଁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆବରଣ ASTM E1077' ଚୟନ କରନ୍ତୁ [ଚିତ୍ର 9a] ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରାସ୍ତ ଖଣିଜତା ଦେଖାଯାଏ [ଚିତ୍ର 9ଖ]। କରାଯାଇଥିବା ଆବରଣର ଆବରଣ ବନିବୁ ଘାଟିତ ଏବଂ ଘାଟିତରେ ଆବରଣ ଶେଷକ ଗୁଣନତା ଉପରେ ଖଣିଜତାରେ "ମାପ" ଚୟନ କରନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ସାରଣୀରେ ମାପ କରାଯାଇଥିବା ଘନତା ଦେଖାଯାଏ। ଘନତା ମାପ ପାଇଁ ଆବରଣ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ସାରଣୀରେ "ରିପୋର୍ଟ" ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାପ କରାଯାଇଥିବା ଘନତା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଏକସେଲ ଫାଇଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହାରାହାରି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ 10 କମିବା ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ପରାସ୍ତ କରାଯାଏ।

ମଲ୍ଲିକାବଳୀ	ପରାସ୍ତ ଖଣିଜତା	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	

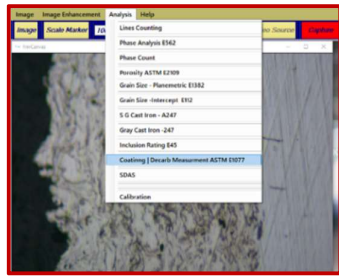


[ଚିତ୍ର 9a]

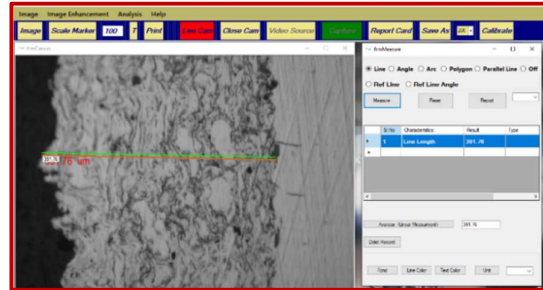


[ଚିତ୍ର 9ଖ]


୧୫. ଆବରଣରେ ଅକସ୍ମାତର ଶତକଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାଇଁ, ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ମାତ୍ରରେ "ଫେଜ୍ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ E562" ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଚିତ୍ର ୧୦କ] ଏବଂ ତାହା ପାରାମିଟର ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରାମିଟର ଖଣ୍ଡରେ [ଚିତ୍ର ୧୦ଖ] ପରାମିଟର 1 ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ S.No12 ରେ ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରାମିଟର ଅନୁସାରେ ପାରାମିଟର ମାପ କରନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ପରାମିଟର 2 [ଲାଇ] ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ ନିମ୍ନ ଏବଂ ଉପର ସାମାନ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତୁ । ତାହା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର ୧୦ଗ] ହୋଇଥିବା ଅକସ୍ମାତ ମାପକରୋଷ୍ଟରକରରେ ଲାଇ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇ ପରାମିଟର 2 ପାଇଁ ପରାମିଟର ମାପ କରନ୍ତୁ । ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅକସ୍ମାତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚୟନ କରାଯାଏ ଚିତ୍ର ୧୦ଗ] ହୋଇଥିବା ମାପକରୋଷ୍ଟରକରରେ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ପରାମିଟର ଏବଂ ପରାମିଟର ପରାମିଟର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚକ କରାଯାଇ ପାଇଁ ପରାମିଟର % ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ମାପକରୋଷ୍ଟରକରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସନ୍ଧାନ 10 କମିବା ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରାମିଟର ମାପକରୋଷ୍ଟରକରରେ ପରାମିଟର କରାଯାଏ ।

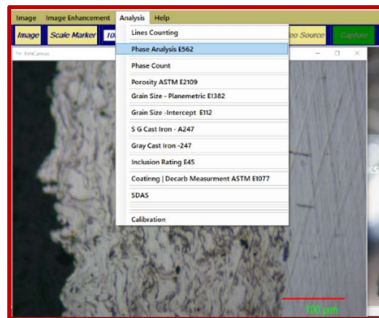


[ଚିତ୍ର 10a]

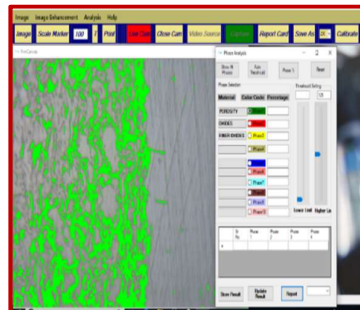


[ଚିତ୍ର 10ଖ]

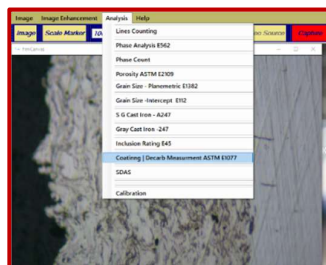

[ଚିତ୍ର 10a]

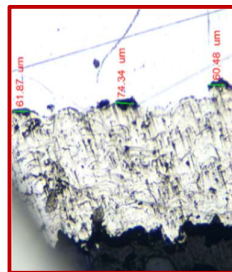

[ଚିତ୍ର 10ଖ]

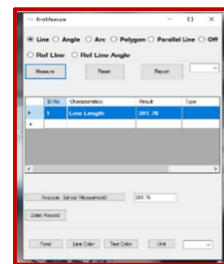

[ଚିତ୍ର 10c]

ମାପକରୋଷ୍ଟରକର	ପରାମିଟର ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ପର୍ଶରେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଷେତ୍ର/କ୍ଷେତ୍ର/୦୭/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୭/୦୧/୨୦୨୪	

୧୭ ଆବରଣର ଇଣ୍ଡରଫେସିଆଲ୍ ପରଦକ୍ଷଣ (IC) ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରାଯିବ। ପାଇଁ, ଆବରଣ ASTM E1077' ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରାଯିବ। ବର୍ଗିକୃତ ମାପକ୍ଷେତ୍ରରେ [ଚିତ୍ର ୧୦୦] ଏବଂ ଚିତ୍ର 10b ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରଦକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। କରଦକ୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବନ୍ଦକୁ ଗୁଞ୍ଜିତାନ୍ତର ଅଥବା ଇଣ୍ଡରଫେସରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ପରଦକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାର ଲମ୍ବ ମାପ କରନ୍ତୁ ଯାହା ତାପରେ ସାରଣୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାର ଲମ୍ବ ମାପ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଇଣ୍ଡରଫେସ ପରଦକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ପରଦକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ତାପରେ "ରୈପାର୍ଟ" ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ମାପ କରାଯାଇଥିବା ଘନତା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲରେ ପରାପତ୍ର ହାରାହାର ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନମୁନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ 10 କମ୍ପା ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କିତ ପରଦକ୍ଷଣ ପରଦକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। କ୍ଷେତ୍ରର ଲମ୍ବ ମାପନିତ୍ରାୟକ ମାପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 20, ତେବେ ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ୨୦ x ଲମ୍ବିରମାପକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରଦକ୍ଷଣ ହାରାହାର IC1, IC2.....IC20 ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରଦକ୍ଷଣ ମୋଟ ଲମ୍ବ = IC1+IC2+IC3+.....+IC20 = IC ଇଣ୍ଡରଫେସିଆଲ୍ ପରଦକ୍ଷଣ % = ମୋଟ ମାପ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରଦକ୍ଷଣ/ମୋଟ ଆବରଣ ଲମ୍ବ। ମୋଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରଦକ୍ଷଣ % = IC%*100

ମାପକ୍ଷେତ୍ରକରଣ	ପରଦକ୍ଷଣ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	